


Provox LaryButton - Wanneer en Hoe te gebruiken?

De provox LaryButton houdt zichzelf in het stoma op zijn plaats en voorkomt krimpen van het stoma. De LaryButton maakt het gebruik mogelijk van de Provox HME- cassettes, de Provox ShowerAid en de Provox FreeHands HME- cassette in combinatie met de Provox FreeHands FlexiVoice.




1. De maat van de LaryButton

- Het is afhankelijk van de vorm en maat van uw stoma of u de LaryButton kunt gebruiken. De LaryButton hoort goed in het stoma te passen, zonder irritatie te veroorzaken. Overleg eerst met uw behandelend arts of logopedist als u een LaryButton wilt gaan gebruiken. Uw arts of logopedist zal samen met u de juiste maat selecteren.

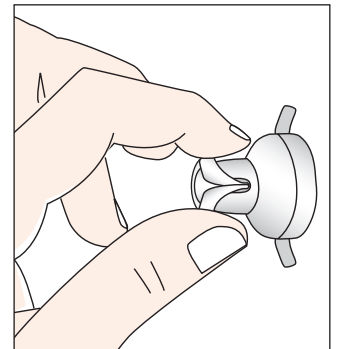

2. Inbrengen van de Provox LaryButton

- Breng wat glijmiddel aan op het smalle deel van de LaryButton dat in het stoma wordt geplaatst.
- Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis.
- Vouw het smalle uiteinde in elkaar en houd dit stevig vast tussen uw vingers.
- Breng het smalle, opgevouwen gedeelte in in het stoma en laat rustig uw vingers los.
- Controleer of de LaryButton goed op zijn plaats zit en niet tegen de stemprothese drukt.
- De LaryButton kan extra worden vastgemaakt met Provox LaryClips of een Provox TubeHolder. (Voor meer informatie over de Provox LaryClips of een Provox TubeHolder kunt u bellen naar onze Customer Service).
- Plaats een Provox HME- cassette of FreeHands HME- cassette met de Provox FreeHands FlexiVoice in de opening van de LaryButton.

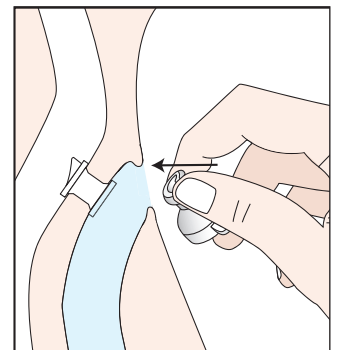

3. Gebruik van de Provox LaryButton


- Als u moeite heeft om aan de LaryButton te wennen, draag deze dan zo lang mogelijk en haal hem er dan uit.
- Voer langzaam de tijd dat u de LaryButton draagt op.
- Gebruik de LaryButton nooit gedurende de nacht.
- Gebruik 's nachts een Provox stomapleister of een LaryTube met een kleinere diameter. Zo krijgt uw stoma de gelegenheid weer iets te krimpen.



Tip: Als uw stoma gedurende de dag ruimer wordt, kunt u een LaryButton met een grotere diameter gebruiken tot de nacht.


4. De Provox HME verwijderen van de LaryButton

- Houd de LaryButton met één hand op zijn plaats.
- Pak de HME en draai deze voorzichtig. Neem de HME- cassette eruit terwijl u de LaryTube op zijn plaats houdt.

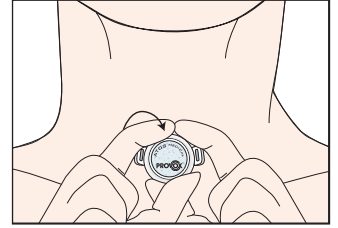

5. De LaryButton verwijderen

- Pak de Provox LaryButton vast en draai hem voorzichtig. (ongeveer een halve slag) zodat de smalle rand kan inklappen en daardoor minder breed wordt.
- Verwijder de LaryButton door deze voorzichtig uit het stoma te kantelen.

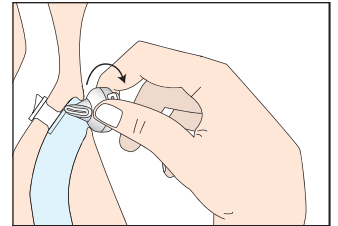

6. Reinigen van de LaryButton

- Raadpleeg voor een uitgebreide reinigingsinstructie de handleiding van de LaryButton.
- Spoel de LaryButton met kraanwater.
- Reinig de LaryButton met een Provox TubeBrush.
- Spoel de LaryButton weer na met kraanwater.
- De LaryButton kan worden gedesinfecteerd door deze 5 tot 10 minuten te koken in kraanwater.

